

Ваша практика – источник *нашего* вдохновения.™

OptiBond™ Solo Plus | Сделайте силу нашего адгезива вашей силой



OptiBond™ Solo Plus | Сила в основе ваших реставраций



Когда речь идет о выборе клинически проверенной адгезивной системы, OptiBond™ Solo Plus является «золотым стандартом». OptiBond™ Solo Plus включает в себя праймер и адгезив в сочетании с гелем на основе фосфорной кислоты Gel Etchant от компании Kerr. Этот однокомпонентный адгезив предназначен для прямых и непрямых реставраций.

Идея создания:

Соединение праймера и адгезива в одной бутылочке позволило удовлетворить потребность врачей в более простой адгезивной системе, которая совмещает в себе возможность тотального протравливания и долговечность.

Исследования

OptiBond™ Solo Plus наполнен на 15% частицами размером 0,4 мкм, которые используются во многих хорошо известных стоматологам композитах производства Kerr. Такой наполнитель усиливает соединение гибридного слоя и дентинных канальцев, создавая по-настоящему структурированное сцепление необычайной прочности, не наблюдающейся при применении обычных ненаполненных адгезивных систем.


Долговечные химические и микромеханические связи, образующиеся при использовании OptiBond™ Solo Plus, предотвращают микроподтекание и снижают усадку, что позволяет обеспечить превосходное краевое прилегание.

Особенности


Непревзойденная прочность на разрыв и эластичность.

- **Клинически проверен.** Универсально признанный продукт, ставший стандартом качества в отрасли. Эффективность использования доказана во всем мире.
- **Доступен в бутылочках и унидозах.**
- **Надежен и долговечен.** Наполнен на 15% запатентованным наполнителем для более глубокого проникновения в дентинные канальцы и для более устойчивого соединения.

Прочность связи при сдвиге (мПа) адгезивов пятого поколения

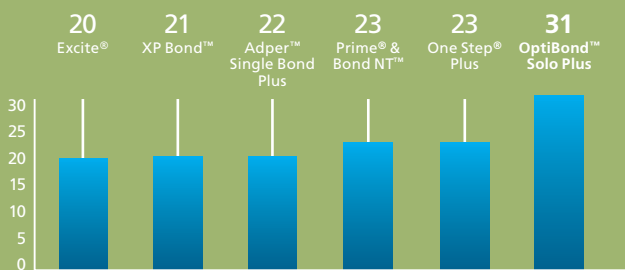

Исследование подготовлено H. Lu, H. Bui, X. Qian, D. Tobia, Kerr Corporation.

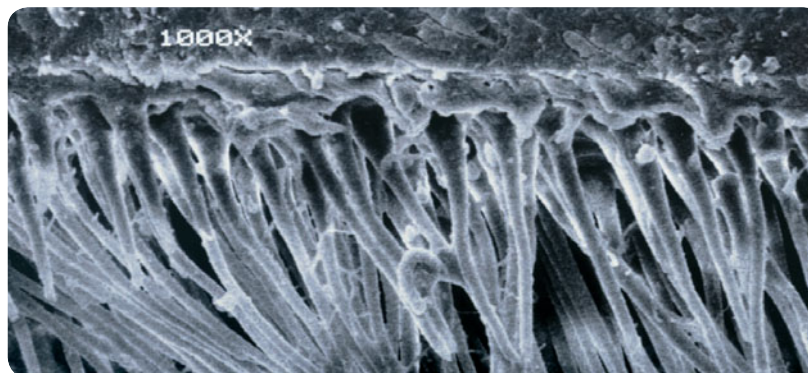

Сильное и долговечное сцепление. Сканирующий электронный микроскоп показывает превосходное проникновение OptiBond™ Solo Plus в деминерализованный дентин, формирование длинных полимерных тяжей и хорошо выраженного гибридного слоя, и, как результат, великолепную силу адгезии. Результаты тестирования научно-исследовательским отделом Kerr. Данные доступны по запросу.

Московское Представительство Kerr

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1А
Бизнес-центр Brent City, офис 1202
Телефон/факс +7 (495) 797-64-59
www.kerrdental.ru

Представительство Kerr в Санкт-Петербурге

190005, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А
Телефон +7 (812) 331 86 96
Факс +7 (812) 251 06 55

Ваша практика – источник *нашего* вдохновения.™

Информация для заказа

29670 Набор OptiBond™ Solo Plus в бутылочках

Комплект: 2 бутылочки (5 мл) адгезива OptiBond™ Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля, 10 одноразовых насадок для шприца с протравливающим гелем, 25 палеток для смешивания, 100 одноразовых аппликаторов.

29692 Дополнительные упаковки OptiBond™ Solo Plus в бутылочках

Комплект: 1 бутылочка (5 мл) OptiBond™ Solo Plus.

29682 E Набор OptiBond™ Solo Plus в унидозах

Комплект: 100 унидоз OptiBond™ Solo Plus по 0,1 мл (всего 10 мл), 1 шприц (3 г) протравливающего геля, 10 одноразовых насадок для шприца с протравливающим гелем, 25 палеток для смешивания, 100 одноразовых аппликаторов.

29669 E Дополнительные упаковки OptiBond™ Solo Plus в унидозах

Комплект: 100 унидоз OptiBond™ Solo Plus (всего 10 мл).

60561 Дополнительные упаковки OptiBond™ Solo Plus в бутылочках

1 бутылочка (3 мл) OptiBond™ Solo Plus.



Kerr™