

Ваша практика – источник *нашего* вдохновения.™

Maxcem Elite™ | Проще простого





Maxcem Elite™ является самопротравливающим, самоадгезивным композитным цементом для непрямых реставраций, с увеличенной силой адгезии и непревзойденной простотой использования: не требуется ручного замешивания и хранения в холодильнике, излишки легко удаляются. Для большего удобства имеются интраоральные насадки и насадки для внесения материала в канал, для работы в труднодоступных областях.

Проблематика:

Адгезивные системы очень чувствительны к точному соблюдению техники применения, что является ежедневным вызовом и проблемой для врача. Maxcem Elite позволит вам пропустить этот этап работы, обеспечивая удобство и великолепный результат.

Решение:

В составе Maxcem Elite™ использован тот же адгезив, что и в знаменитом семействе OptiBond™ от Kerr. Оптимизированная матрица и наполнитель увеличивают устойчивость к влаге, что позволяет добиться более высокой адгезии и возможности немедленной полимеризации светом для большей стабильности. Тиксотропные свойства Maxcem Elite™ облегчают нанесение материала и простоту удаления излишков. Запатентованная redox-иницирующая система обеспечивает уникальную цветостабильность, по сравнению с амино-иницирующими системами, для еще более эстетичных реставраций.

Характеристики:


Сила адгезии 22–25 МПа. Превосходная адгезия без применения адгезивной системы.

Простота использования. Не требуется ручного замешивания и хранения в холодильнике, излишки легко удаляются.

Совместимость с любыми поверхностями. Дентин, эмаль, безметалловая и металлокерамика, блоки CAD/CAM.


Высокоэффективный механизм полимеризации в темноте. Полная полимеризация даже в отсутствие света.

Сила адгезии (МПа) к дентину через 24 часа

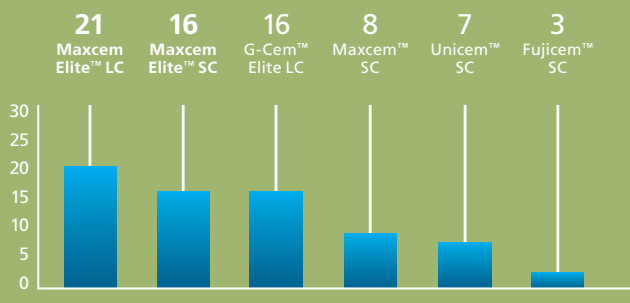

24-часовой тест. Информация предоставлена Dr. Carlos Munoz, SUNY (Буффало).
Более подробная информация – по запросу

Сила адгезии (МПа) Maxcem Elite™ к различным поверхностям (самоотверждение)

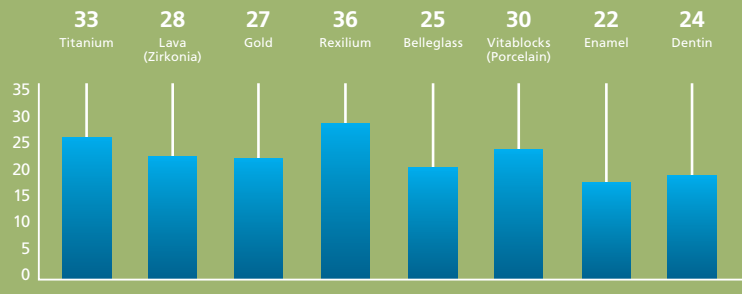

24-часовой тест. Внутрикorporативное исследование. Более подробная информация – по запросу

Информация для заказа

34055 Maxcem Elite™ Standard Kit

Состав: 5 шприцев по 5 г (2 х прозрачного оттенка, белый, белый опакующий, желтый), 30 смесительных насадок стандартных, 20 насадок с широким наконечником, 10 интраоральных насадок, 10 насадок для внесения материала в канал, инструкция.

34056 Maxcem Elite™ Value Kit

Состав: 2 шприца по 5 г прозрачного оттенка Maxcem Elite™, 1 шприц для автоматического смешивания 11,7 г TempBond® NE™, 10 смесительных насадок стандартных, 10 насадок с широким наконечником, 10 интраоральных насадок, 10 насадок для шприца TempBond® NE™, инструкция.

34057 Maxcem Elite™ Mini Kit

Состав: 1 шприц 5 г прозрачного оттенка, 5 смесительных насадок стандартных, 5 насадок с широким наконечником, 5 интраоральных насадок, инструкция.

Дополнительные упаковки Maxcem Elite™:

Состав: 2 шприца по 5 г, 10 смесительных насадок стандартных, 10 насадок с широким наконечником, инструкция.

34058 прозрачный

34059 белый

34060 белый опакующий

34061 желтый


34062 коричневый

Аксессуары

34074 50 стандартных смесительных насадок

34075 10 интраоральных смесительных насадок

34076 10 насадок для внесения материала в канал.

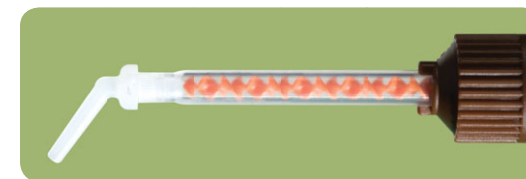

Московское Представительство Kerr

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1А
Бизнес-центр Brent City, офис 1202
Телефон/факс +7 (495) 797-64-59
www.kerrdental.ru

Представительство Kerr в Санкт-Петербурге

190005, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А
Телефон +7 (812) 331 86 96
Факс +7 (812) 251 06 55

Ваша практика – источник *нашего* вдохновения.™

Kerr™